

VISIA

COMPLEXION
ANALYSIS



REVOLUCIONA LAS CONSULTAS DE CUIDADO DE LA PIEL

medicinelaser
LATAM

IMAGING EXCELLENCE FROM
CANFIELD

VISIA

ATRAIGA más pacientes



Visualice la superficie de la piel en tres dimensiones desde cualquier ángulo con el visor 3D.

El análisis de pestañas evalúa y mide los resultados de los tratamientos de mejora de las pestañas.

Capture fácilmente imágenes consistentes



El módulo de captura de VISIA gira alrededor del sujeto estacionario para capturar las vistas faciales izquierda, derecha y frontal.



Las imágenes faciales repetibles le permiten hacer un seguimiento del progreso del tratamiento y los resultados de manera efectiva a lo largo del tiempo.

Los modos de iluminación IntelliFlash®, polarizado cruzado y UV se utilizan para registrar y medir las condiciones de la superficie y del subsuelo, todo con una serie de flashes rápidos y automatizados.



El modo de solo captura permite obtener imágenes faciales rápidas y repetibles para la documentación fotográfica sin detenerse para procesar las imágenes. El análisis se puede realizar más tarde, si se desea.

La detección del tipo de piel es automática.

para el procesamiento de imágenes óptimas y análisis de características.



"Hemos estado usando VISIA en nuestra práctica desde 2004, y no puedo imaginar consultas de cuidado de la piel sin uno. Nuestra nueva VISIA de séptima generación lleva la educación y la comunicación del paciente a un nivel completamente nuevo".

—Eliot Battle, M.D.
Cultura Dermatology & Laser Center

El enmascaramiento multizona identifica automáticamente la región crítica para cada característica de complejión y VISIA analiza instantáneamente manchas, arrugas, texturas, poros, manchas UV, manchas café, áreas rojas y porfirinas.



"VISIA ha transformado nuestras consultas estéticas. "No hay mejor manera de comunicarse con un paciente sobre su condición de la piel y las opciones de tratamiento".

—Robert A. Weiss, M.D.
The Maryland Laser,
Skin and Vein Institute

La simulación del envejecimiento comunica los beneficios de los tratamientos anti envejecimiento.



El análisis patentado de Comparación **To Norms** utiliza la base de datos de características de skin más grande del mundo para calificar la skin de su cliente con respecto a otras personas de la misma edad y tipo de skin.

Comparar resultados para cualquier combinación de vistas, características o puntos temporales.

La tecnología RBX® separa el color único. Detalles de componentes de piel roja y marrón. Para la visualización de condiciones como la araña. Venas, hiperpigmentación, rosácea y acné.

La fotografía UV proporciona datos para la evaluación y el análisis del daño solar, incluidas las imágenes de fluorescencia UV para revelar las porfirinas.

COMUNICARSE claramente

MOTIVAR A LOS CLIENTES PARA ACTUAR



TruSkin Age® utiliza el análisis de VISIA para evaluar la condición y edad de la piel de su cliente, proporcionando una nueva métrica revolucionaria para guiar la selección de productos para el cuidado de la piel y las opciones de tratamiento.

El impacto visual
El análisis de la complejidad de VISIA combinado con las recomendaciones específicas de la Biblioteca de productos y tratamientos personalizables de VISIA permitirá a su personal vender tratamientos de rejuvenecimiento y cuidado de la piel de manera más efectiva. Tu cliente puede tomar todo en casa con el portal web ViewMyConsult e informes personalizados impresos.



Personaliza tus consultas de VISIA con estas poderosas opciones.



El portal web de ViewMyConsult® te ayuda a mantenerte conectado con tus clientes, ya que consideran las posibilidades de los procedimientos estéticos.

Accediendo en un portal web seguro y protegido por contraseña, los clientes pueden ver sus fotos, recomendaciones de tratamiento y progreso del tratamiento en la privacidad de su propio hogar. Un panel de control rico en funciones muestra un análisis claro de las visitas de los clientes, las vistas de las páginas, el uso del sistema VISIA, recomendaciones, y más.

ViewMyConsult se incluye con un contrato de servicio actual de VISIA Canfield Care.



La aplicación de consulta VISIA para iPad® permite el acceso a su base de datos en red de imágenes y datos de clientes desde cualquier lugar de la práctica, combinando consultas estéticas completas, selección de recomendaciones de productos mejoradas, y soporte multi-idioma con la comodidad de una tablet.



El Acuerdo de servicio de **Canfield Care®** proporciona asistencia técnica ilimitada, garantía de hardware, seminarios web de capacitación, actualizaciones de software y acceso al portal de pacientes ViewMyConsult. Un año de Canfield Care está incluido con cada VISIA sin costo adicional.

Licencias adicionales. Con VISIA instalado en su red de área local, acceda a las sesiones de clientes desde tantas estaciones de trabajo como necesite, perfecto para cualquier práctica con múltiples salas de consulta.



La VISIA Deluxe con carro móvil integrado proporciona una solución completa de imágenes llave en mano.

Soluciones de análisis de complejión VISIA

Incluye:	Sistema Básico	Solución escritorio	Solución Deluxe
Cabina de imágenes VISIA y software	✓	✓	✓
PC todo en uno de Dell - pantalla táctil		✓	✓
Teclado y mouse inalámbricos		✓	✓
carro de imágenes móvil			✓
2 horas de entrenamiento online *	✓	✓	✓

* Para usuarios con conexión a internet de alta velocidad.




La integración de Mirror® proporciona una interfaz directa con el Mirror de Canfield

software de imágenes médicas (disponible por separado), para ayudar a comunicar los beneficios del rejuvenecimiento y los inyectables. La gestión de imágenes médicas de Mirror mantiene todas las imágenes de un paciente, desde cualquier cámara, al instante, todo en una pantalla.

Dimensiones en posición centrada.



Huella con rotación de la cabina izquierda y derecha (vista superior)

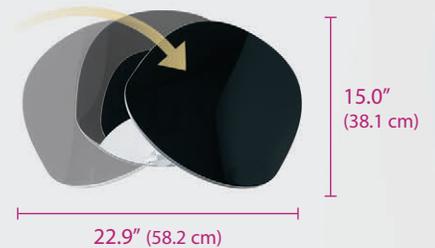

31 lbs. (14 kg)

medicinelaser
LATAM

www.medicinelaser.com



ARGENTINA
Av. Doctor Honorio
Pueyrredón 707, Caballito,
CABA, Argentina.
M: +54 11 3404 7158

CHILE
Sucre 1355, Ñuñoa,
Santiago, Chile.
O: +56 222 691 981
M: +56 9 4409 7105

ECUADOR
Av. Cristóbal Colón
E6-12 y Rábida.
Quito- Ecuador.
M: +51 960 544 298

PERÚ
Calle Almirante Lord
Cochrane 322,
Miraflores, Lima, Perú.
O: +51 1 704 80 14
M: +51 983 552 813

+ OFICINAS CENTRALES

ventas@medicinelaser.com